



MANUAL DE UTILIZARE
IN 6235 Centura electrica inSPORTline eHeater



CUPRINS






INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA.....	3
MENTENANTA.....	3
UTILIZARE CORECTA.....	4
TABEL MARIMI.....	5
PRODUS SI ACCESORII.....	5
BATERIE EXTERNA.....	6
SACULET DE INCALZIRE.....	6

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Cititi manualul cu atentie inainte de prima utilizare a produsului si pastrati-l pentru referinte ulterioare. Tineti cont de toate avertizarile pentru a evita riscul de accidentare.
- Folositi produsul conform instructiunilor din manual. O utilizare gresita poate deteriora produsul sau va poate afecta sanatatea. Nu modificati centura in nici un fel.
- Utilizati doar accesoriile furnizate cu acest produs.
- Nu folositi centura in timpul somnului.
- Nu folositi centura mai mult de 60 minute consecutiv.
- Feriti produsul de copii si animale. Centura trebuie folosita doar de catre adulti.
- Persoanele cu probleme de sanatate (paralizie, insensibilitate termica etc.) nu trebuie sa foloseasca centura. Produsul nu trebuie folosit de catre gravide sau persoanele cu diabet.
- Nu folositi produsul in incaperi cu substante inflamabile, gaze, sau in depozite de oxigen.
- Nu apasati si nu stati pe acest produs.
- Nu impaturati centura in timp ce functioneaza.
- Nu folositi elemente din metal cu aceasta centura pentru a evita socul electric.
- Verificati in mod regulat cablul daca nu este uzat si nu trageți brusc pentru a scoate cablul din priza Nu folositi niciodata un produs deteriorat.
- Consultati medicul inainte de a utiliza produsul. Daca in timpul utilizarii aveti ameteli, sau alte complicatii, opriti-va imediat.
- Centura nu este potrivita pentru persoanele cu rani, sangerari sau edem.
- Nu folositi un material izolant pentru a acoperi centura in timp ce aceasta functioneaza.
- Verificati-va pielea in mod regulat pentru a evita riscul de arsuri.
- Folositi doar surse de alimentare corespunzatoare.
- Produsul nu detine un certificat terapeutic si folosirea sa nu substituie ingrijirea medicala profesionala.






MENTENANTA

- Scoateti saculetul de incalzire din centura.
- Spalati centura la program scurt de spalare, cu apa rece (mod de spalare standard).
- Nu introduceti centura in uscator.
- Nu spalati saculetul de incalzire. Stergeti-l cu o carpa umeda. Feriti conectorul de umezeala.

	Nu calcati.
	Spalati la masina la max. 30°C.
	Nu folositi inalbitor.
	Nu introduceti centura in uscator.
	Nu curatati chimic produsul.

UTILIZARE CORECTA

- Introduceti saculețul de incalzire (cu suprafat gri in sus) in centura si conectati-l la baterie.
- Porniti bateria si verificati daca lumina indicatoare a bateriei se aprinde. Introduceti bateria in buzunarul pentru baterie, in afara centurii.
- Infasurati centura in jurul unei parti a corpului.
- Ajustati centura. Nu o strangeti prea tare pentru a evita obstructia circulatiei.
- Prin utilizarea corecta, acest dispozitiv incalzeste partile corpului vizate si creste circulatia.

	Abdomen
	Umar
	Genunchi
	Glezna
	Talie

TABEL MARIMI

S	24"~30"
M	28"~36"
L	34"~42"



Buzunar baterie externa

Produs si accesorii

		
Centura	Saculet de incalzire	Baterie externa

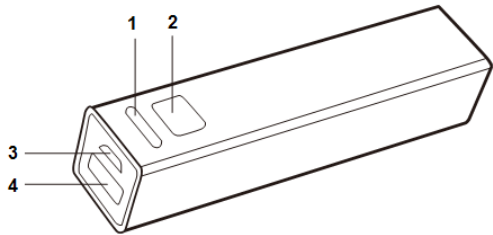


BATERIE EXTERNA

Capacitate	2,200 mAh
Intrare	5V 1A
Iesire	5V 1A
Dimensiuni	92*25*25 mm
Greutate	0.125 g

ATENTIE!

- Durata de incarcare a bateriei externe dureaza 4 ore (5V 1A).
- Cicluri de incarcare: mai mult de 300
- Temperatura de utilizare: -5°C - 35°C
- Protejati bateria de lichide si nu o dezasamblati.
- Nu scapati bateria pe jos.
- Evitati temperaturile extreme.


1) Indicator LED Incarcare: lumina rosie intermitenta Baterie incarcata: lumina rosie continua In uz: lumina albastra continua
2) ON/OFF button
3) Intrare
4) Iesire

Saculet de incalzire

Saculet de incalzire din fibra carbon, 5V

Fibrele non metalice au fost produse in conditii de temperatura si presiune inalta.

- Voltaj: 5 VDC
- Impedanta electrica: 10+/-1.5 ohm
- Curent nominal: 0.5 A
- Putere: 2.5 W

